

icatu 4.0

PCA intelli

Bomba de Infusión Peristáltica



icatu 4.0 PCA intelli

Bomba de infusión para **analgesia controlada por el paciente.**


INNOVADORA CON 7 PROTOCOLOS

CONTINUO




Únicamente mantenimiento continuo, sin bolus

CONTINUO + BOLUS

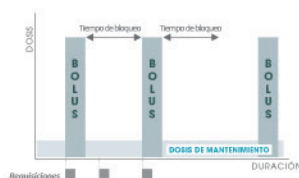

Dosis de mantenimiento continuo + bolus solicitados por el paciente

SOLAMENTE BOLUS

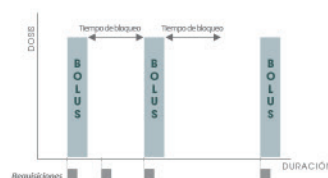

Bolus administrado a cada requisición del paciente

BOLUS + MANTENIMIENTO TEMPORARIO




Bolus requerido por el paciente + dosis de mantenimiento temporario

BOLUS + MANTENIMIENTO DECRECIENTE




Bolus requerido por el paciente + una dosis de mantenimiento temporario que reduce gradualmente si no hay nuevas requisiciones de bolus por el paciente

BOLUS + MANTENIMIENTO BAJO DEMANDA

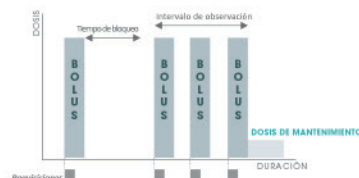

Bolus solicitados por el paciente + mantenimiento temporario iniciado después de una determinada cantidad de bolus solicitados por el paciente

BOLUS + BOLUS INTERMITENTE

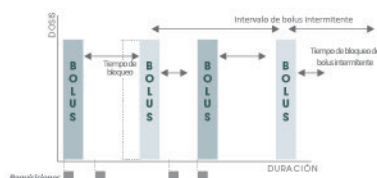

Bolus requerido por el paciente + bolus intermitente programado

Personalice la terapia del paciente

usando una biblioteca de fármacos parametrizada o agregándole nuevos fármacos

MORFINA | METADONA | FENTANILO | ROPIVACAÍNA
BUPIVACAÍNA | TRAMADOL | CLONIDINA | DEXMEDETOMIDINA

Comodidad, seguridad y precisión



Versatilidad

9 modos de programación:
permite otras aplicaciones
en el mismo equipo



Bloqueo de
teclado
por contraseña



Sensor de gotas
uso opcional*



Llave de
seguridad



Nuevo sensor
oclusión superior



Control
de bolus
anatómico



Compatible con los softwares SamINTELLI® y SamMANAGER®.

PRESENTACIONES

CÓDIGO	VERSIÓN
PB006552	icatu 4.0 PCA Intelli WiFi
PB006562	icatu S 4.0 PCA Intelli WiFi

Modelos "S": bombas para uso exclusivo con descartables dedicados Icaset®

Consulte la línea de dispositivos de Infusión Samtronic.

*Sensor de gotas opcional solo en los modelos S.



samtronic.com.br
export@samtronic.com.br



Acceda al
canal de
YouTube
de Samtronic

SEDE:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Teléfono: +55 11 2244-7750

UNIDAD FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Teléfono: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Teléfono: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN NORESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Teléfono: +55 81 3092-3384

Imágenes meramente ilustrativas. Compruebe si los productos están registrados en su país. Las instrucciones de uso pueden variar según la localidad. Contacte con Samtronic o con un representante autorizado para obtener más información. Samtronic y sus marcas registradas son propiedad de Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos los derechos reservados.

 samtronicoficial

 samtronicoficial

 samtronicoficial